

H.Q.S Schleuse


Einführschleuse

H.Q.S - High Quality Sealing

- optimierter Zugang bei EVAR, TEVAR und TAVI
- stoppt Blutverlust bei komplexen endoluminalen Eingriffen trotz hohem arteriellen Druck
- speziell entwickeltes Iris-Ventil in Kombination mit hämostatischer Silikonvalve
- sichere Verriegelungs- oder Fixierungsmöglichkeit des Ventils und seiner Öffnungsposition
- ideal für Fenestrierungseingriffe und Einsätzen von Führungsdrähten und Kathetern
- erhältlich in 18-22F in der Länge 190 mm
(14-24F in der Länge 140mm auf Anfrage)



Bestellinformation

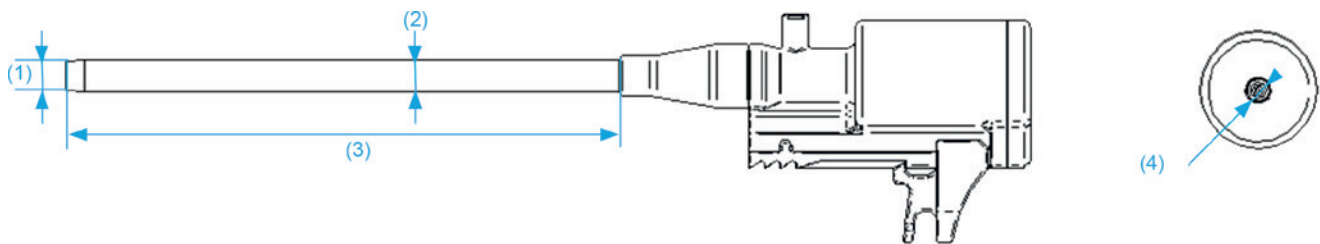

Der maximale Außendurchmesser des Führungsdrahtes beträgt 0,89 mm (0,035") (4).

Bestell-Nr.	ID in F (1)	ID in mm (1)	OD in mm (2)	Länge in mm (3)	VE
2064-HQS-18F-190	18	6,0	7,5	190	1 Stück
2064-HQS-20F-190	20	6,7	8,2	190	1 Stück
2064-HQS-22F-190	22	7,3	8,8	190	1 Stück

Größen 14-24F in der Länge 140mm auf Anfrage.*
Im Set mit X-Cath Adapteraufsatz erhältlich.

*ggf. längere Lieferzeit mit einzuplanen.

Lamed GmbH
Gleißentalstraße 5a
82041 Oberhaching

info@lamed.de
089 / 6666 93 - 0
www.lamed.de




X-Cath

Multiple Access Device für H.Q.S Schleuse

X-Cath ist ein Aufsatzadapter zur H.Q.S Einführschleuse. Er wurde speziell entwickelt, um zusammen mit der H.Q.S bis zu vier parallele Zugänge mit nur einem Device legen zu können. Die einzelnen Drähte und Katheter sind frei bewegbar voneinander und manipulieren dabei weder Position noch Funktion der jeweils anderen. Es müssen nicht alle Kanäle verwendet werden.

Alle vier Kanäle sind mit zusätzlichen Hämostaseventilen versorgt und unterstützen das „no bloodloss“ Prinzip der H.Q.S.


Komplexe und zeitlich aufwändige endovaskuläre Verfahren wie Fenestrierungen oder Chimney Techniken können durch das Set aus H.Q.S und dem 4-Kanal X-Cath Aufsatz nahezu ohne Blutverlust und mit übersichtlicher Anordnung der Drähte deutlich einfacher und zeitsparender durchgeführt werden.

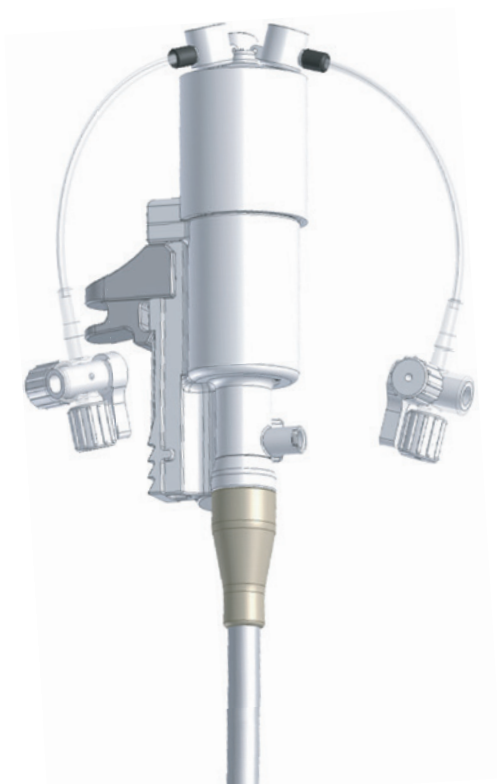

„Durch die Verwendung dieses Schleusensets sparen wir bis zu 1,5L Blut bei unseren 4-fach Fenestrierungen.“

Dr. Claude Mialhe, Centre Cardio-Thoracique de Monaco

Bestellinformation

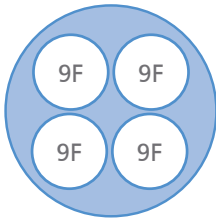Bestell-Nr.	2064-X-Cath-4
Ansicht innen	
VE	1 Stück

Im Set mit H.Q.S Schleuse erhältlich.